

为获得最佳学习体验，将您的设备保持为最新版本至关重要。更新您的“心血管与呼吸系统检查用训练模型”(CaRE) 软件，即刻启用优化后的功能。

您的 CaRE 软件是最新版本吗？

- 1.将您的设备连接至 CaRE 模型
- 2.打开设置菜单中的“关于”选项卡
- 3.查看您的模型目前所运行的软件版本



- 4.如果显示软件为最新版本，则无需进一步操作

如果软件不是最新版本，该如何更新？

- 1.将您的设备连接到本地 WiFi 网络

CaRE 软件更新（2025 年 1 月）

- 2.使用上方链接下载最新版本
- 3.下载完成后，将您的设备连接至 CaRE 模型
- 4.在设置中，打开“更新”选项卡，然后点击“选择文件”
- 5.在弹出的文件资源管理器中，找到并选择最新版本的软件，然后点击“打开”
- 6.在“更新”选项卡中点击“上传”

文件上传完成后

注：更新过程最长可能需要 15 分钟。


当更新开始时，您会看到 CaRE 模型已不再出现在可用的 WiFi 列表中。在更新过程中，模型将保持离线状态。当模型重新出现在可用的 WiFi 列表中时，即可将您的设备重新连接至模型。

LimbPAD 软件更新

1. 将 LimbPAD 连接至 CaRE 模型（注意：请确保 LimbPAD 电量充足且未连接充电器）
2. 如果您的设备连接成功且未弹出通知，则无需进一步操作

有 LimbPAD 更新可用

1. 如果 LimbPAD 的软件不是最新版本，将弹出提示消息（如下图所示）

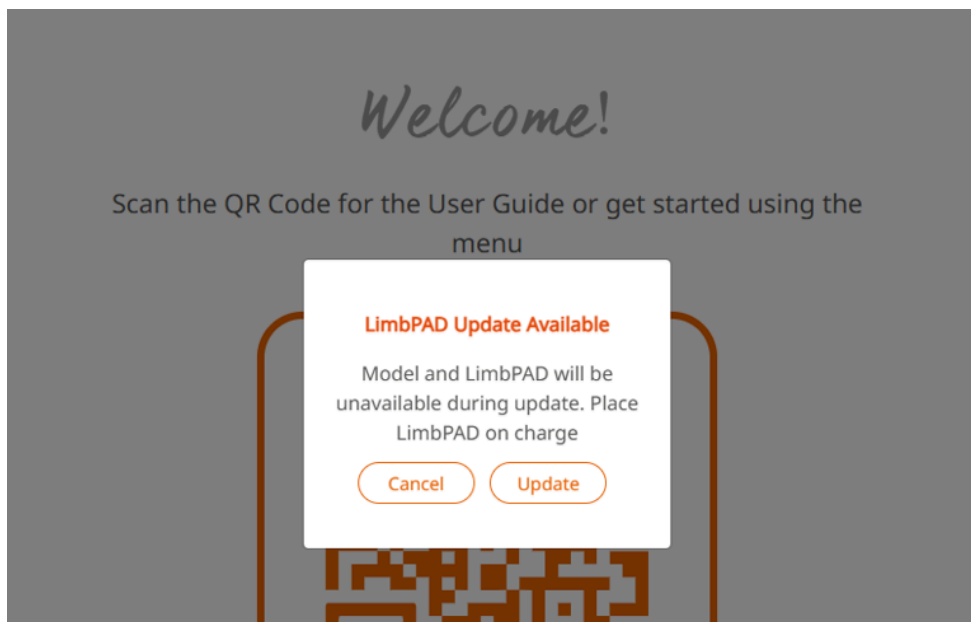

2. 点击“更新”
3. LimbPAD 的 LED 指示灯将开始闪烁蓝光（注意：如果 LimbPAD 指示灯未开始闪烁，请重启 LimbPAD 并再次选择“更新”）
4. 5-10 分钟后，当 LimbPAD 开始闪烁粉光时，表示更新已完成

更新过程中遇到问题了？请联系您当地的服务团队获取帮助。