




GAMME DE SIMULATEURS D'INFILTRATION DE L'ÉPAULE

70200 70219 GUIDAGE PAR PALPATION

L'application compagnon Android permet aux étudiants et aux formateurs de visualiser l'anatomie sous-jacente et d'indiquer clairement la réussite de la procédure.

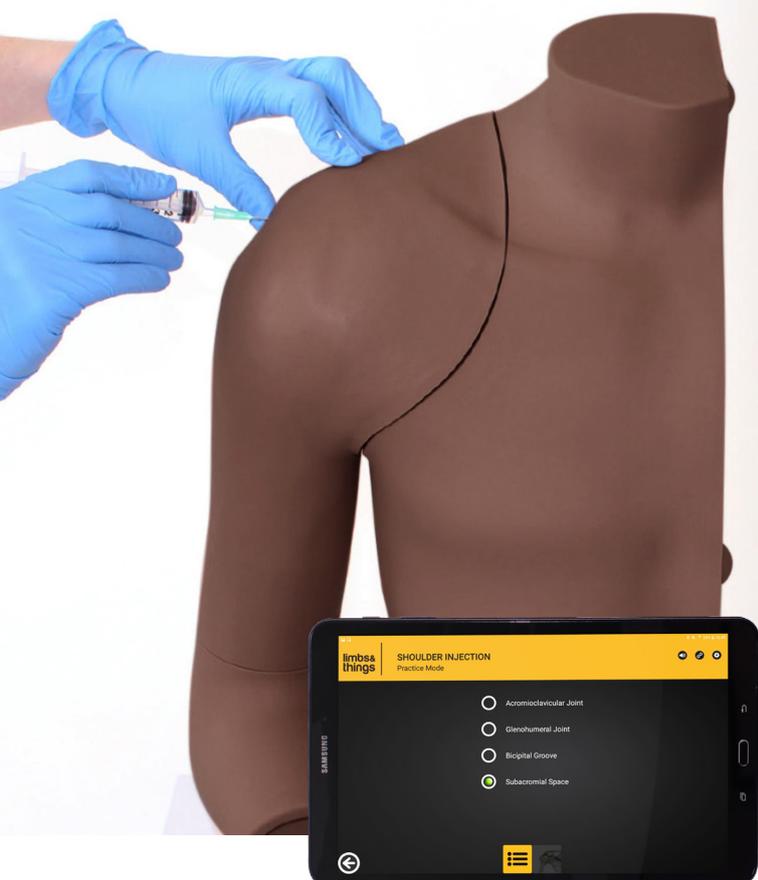

70202 70221 ÉCHOGUIDAGE

Permet de s'entraîner aux techniques d'infiltration échoguidée, ainsi qu'à l'injection et à l'aspiration de liquide sous échographie.



L'enseignement n'a jamais été aussi proche de la réalité

limbsandthings.com

GUIDAGE PAR PALPATION

QUALITÉS DU PRODUIT

RÉALISME

- Couches de peau et de muscles distinctes pour une sensation réaliste lors de l'introduction de l'aiguille

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- Palpation pour trouver les 4 sites d'injection les plus courants
- Retour instantané lorsque l'étudiant localise le site correctement
- Différentes approches d'injection pour permettre de développer ses préférences
- Convient pour la formation des étudiants de troisième cycle
- L'application offre une vue complète à 360 degrés du site d'injection et de l'anatomie sous-jacente pour faciliter l'apprentissage
- Peaux de remplacement économiques

POLYVALENCE

- Chaque peau peut supporter jusqu'à 500 injections par site (1 peau d'épaule de rechange fournie)
- Connexion Bluetooth simple entre l'application et le simulateur
- Nécessite seulement une aiguille standard (fournie)
- Autonomie des piles allant jusqu'à 500 heures

SÉCURITÉ

- Sans latex


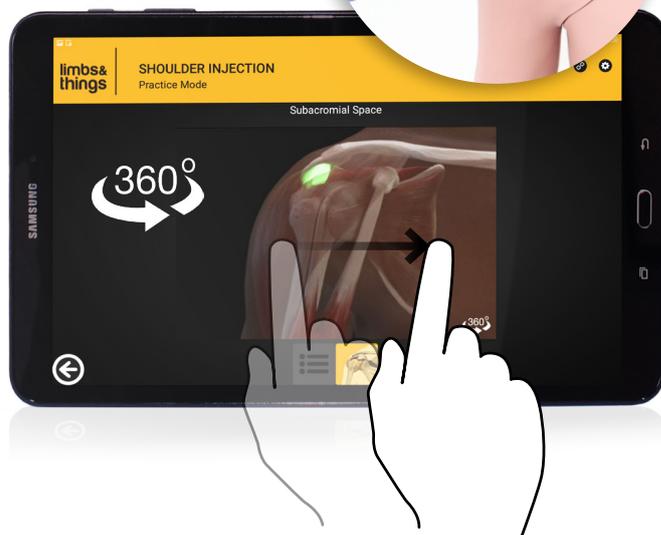


CONTENU:

- Module d'épaule – Guidage par palpation
- Peau d'épaule (1 peau de rechange)
- Torse avec épaule
- Jeu d'aiguilles
- Tablette Android
- Coude
- Piles AA (x2)
- Sac de transport

COMPÉTENCES:

- Entraînement de plusieurs approches sur des sites spécifiques
- Identification des repères anatomiques par palpation
- 4 sites d'injection courants :
 - Articulation acromio-claviculaire
 - Articulation gléno-humérale
 - Sillon bicipital
 - Espace sous-acromial
- Rotation de l'épaule pour localiser la tête de l'humérus

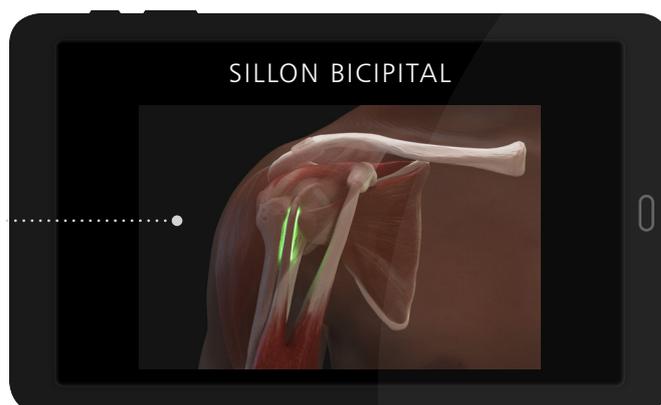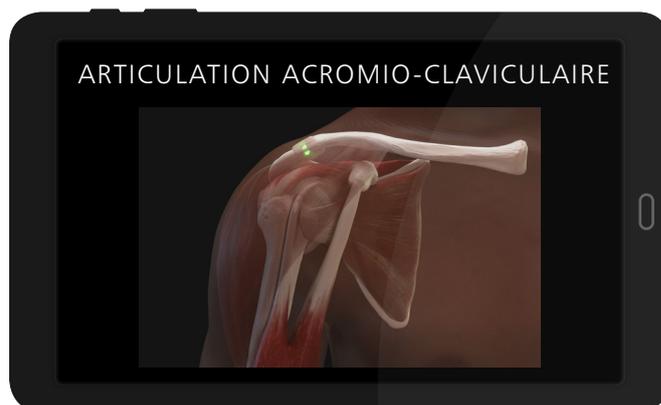

L'application inclut un modèle anatomique interactif de l'épaule ainsi que des liens vers des guides de techniques d'injection. Disponible gratuitement en téléchargement sur limbsandthings.com

ÉCHOGUIDAGE

QUALITÉS DU PRODUIT

RÉALISME

– Les matériaux innovants contenus dans l'épaule permettent de réaliser des échographies ultra réalistes

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Des matériaux lumineux visibles par échographie représentent les principaux repères anatomiques
- Le bon déroulement de l'injection peut être confirmé en visualisant le liquide entrant dans le site ou en aspirant le liquide
- La quantité de liquide contenue dans la bourse séreuse sous-deltaïdienne peut être ajustée afin de reproduire aussi bien une distension pleine de liquide qu'un cas sans épanchement
- Fonctionnalité d'entraînement au bloc nerveux – permet aux étudiants de visualiser le nerf supra-scapulaire et de réaliser des injections à proximité de ce dernier

POLYVALENCE

- Simulateur étanche et pouvant supporter jusqu'à 400 injections par site
- Le fait de modifier la taille de la bourse permet aux formateurs de varier le niveau de difficulté des exercices (il est plus difficile d'injecter une quantité de liquide moindre)
- La couleur du Synovial fluid est fidèle à la réalité

SÉCURITÉ

- Sans latex



CONTENU:

- Module d'épaule – Échoguidage
- Torse avec épaule
- Kit d'infiltration échoguidée de l'épaule
- Jeu d'aiguilles
- Liquide synovial (250ml)
- Coude
- Sac de transport

COMPÉTENCES:

- Gestion et positionnement du patient
- Identification des repères anatomiques par échoguidage
- 4 sites d'injection courants :
 - Articulation acromio-claviculaire
 - Articulation gléno-humérale
 - Gaine tendineuse du biceps (située dans le sillon bicipital et enveloppant le tendon)
 - Bourse séreuse sous-deltaïdienne (située dans l'espace sous-acromial)
- Utilisation de la technologie d'échographie pour réaliser des injections sur différents sites en utilisant différentes approches
- Visualisation du nerf supra-scapulaire par échographie

ARTICULATION GLÉNO-HUMÉRALE



ESPACE SOUS-ACROMIAL



AUTRES PRODUITS DE NOTRE

GAMME D'INJECTIONS ARTICULAIRES



SIMULATEUR
D'ASPIRATION ET
D'INJECTION GENOU AVEC
OPTION ÉCHOGRAPHIE

70103

70114

COUDE POUR INJECTION
ARTICULAIRE

30080



MAIN ET POIGNET POUR
INJECTION ARTICULAIRE

30031



PIED ET CHEVILLE POUR
INJECTION ARTICULAIRE

30100

