

limbs& things

EXAMEN DE CADERA INFANTIL

Nuestro simulador para examen de cadera infantil (IHE) ha sido diseñado para cumplir los requisitos específicos de los profesionales sanitarios para la identificación y diagnóstico de la displasia de cadera.

El simulador representa un lactante hembra de un mes de edad y puede imitar una articulación de cadera normal, dislocada y dislocable, o "floja", y permite practicar las maniobras de Ortolani y Barlow, así como el signo de Galeazzi. La lactante ha sido diseñada con módulos intercambiables de pierna normal y anormal, más un torso superior.

42000



NOVEDAD




El aprendizaje más realista posible

limbsandthings.com

EXAMEN DE CADERA INFANTIL

42000

NOVEDAD

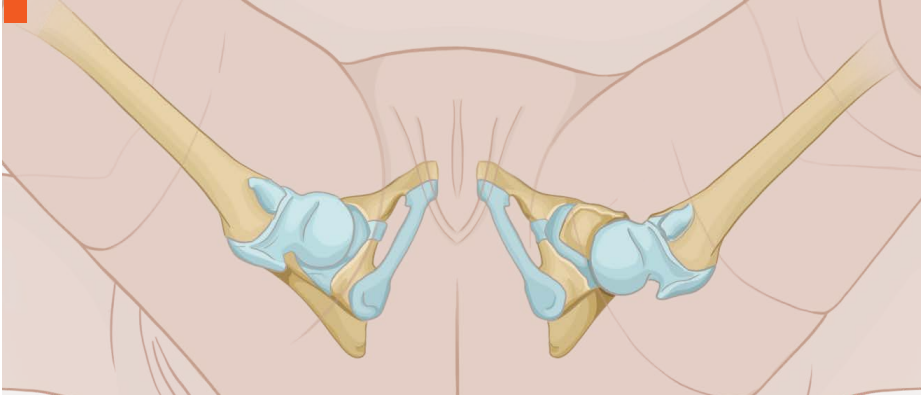

ATRIBUTOS

ANATOMÍA

- Trocánter mayor palpable en los fémures izquierdo y derecho para facilitar el correcto posicionamiento de las manos
- Cadera, rodilla y tobillo articulados para las maniobras de Ortolani y Barlow, y el signo de Galeazzi.

REALISMO

- Sonido realista al reajustar la cadera dislocada
- Lactante hembra de un mes de edad anatómicamente correcto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Rápido y fácil de preparar
- Modelo resistente que permite la práctica repetida de las maniobras de Barlow y Ortolani
- Módulo de cadera normal: permite a los estudiantes reconocer el tacto de una cadera normal
- Módulo de cadera anormal: una cadera luxada que puede ponerse en, y quitarse de, su posición correcta mediante la técnica de Ortolani o la de Barlow, y una cadera dislocable o "floja" que puede luxarse y volverse a corregir con la técnica de Ortolani o Barlow
- Las rodillas y tobillos articulados permiten apoyar los pies del lactante sobre una cama para practicar el signo de Galeazzi

VERSATILIDAD

- Los módulos inferiores intercambiables permiten a los estudiantes reconocer una cadera normal, así como dos tipos de anomalía de cadera

SEGURIDAD

- No contiene látex



■ Ilustración de la parte interna de las caderas y cómo están dispuestas en el modelo

■ Maniobra de Barlow

■ Signo de Galeazzi

QUÉ INCLUYE EL KIT

IHE, superior

IHE, inferior normal

IHE, inferior anormal

IHE, tarjeta ilustrativa



SOLICITAR
PRESUPUESTO



SOLICITAR
DEMOSTRACIÓN



ATENCIÓN
AL CLIENTE

ES V.1 March 2022

limbsandthings.com