



Maya

limbs&
things

Wehen- und
Entbindungssimulator

80500

80600

Vollautomatische Entbindung zeigt
Lernenden die drei Wehenphasen.



limbsandthings.com



Vollautomatische Entbindung zeigt Lernenden die drei Wehenphasen.

Vollautomatische Schulungsmodi für vaginale Untersuchungen, Entbindungsszenarien und postpartale Blutungen. Richten Sie das Modell in Minutenschnelle ein, wählen Sie Ihre Schulungsparameter aus, und Maya übernimmt den Rest.



Schnell eingerichtet und einsatzbereit, damit Sie sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren können



Für die Verwendung mit einer Standardpatientin geeignet, und daher realistischer



Wiederholbare Schulungen bieten allen Lernenden die gleichen Bedingungen



Saubere Simulation von postpartalen Blutungen



Viel Zeit für Lehre: Dank der vollautomatischen Simulation können Sie sich auf die Lehre konzentrieren



Ideal für Untersuchungen und OSCE-Kurse



Unabhängiges Lernen: Dank der einfachen Anwendung können Lernende selbstständig üben



Kein Abonnement erforderlich



Die drei Modi von Maya

VAGINALE UNTERSUCHUNG

Die realistischen Orientierungspunkte wie Sitzbeinstacheln und die vaginale Wand ermöglichen das praktische Einüben von Untersuchungen in den aktiven Wehenphasen.


KONFIGURATIONEN

- 4 Präsentationen:
 - gebeugt
 - nicht gebeugt
 - undifferenziert
 - Beckenendlage
- 4 bis 10 cm Dilatation
- Volle 360°-Positionierung



ENTBINDUNG

- Stellen Sie vollautomatische Entbindungsszenarien passend zu Ihren Schulungen zusammen.
- Kopflage und Beckenendlage
- Protokollieren Sie die Aktionen der Lernenden über das gesamte Szenario und erhalten Sie einen Bericht mit Zeitstempeln
- Sensoren erkennen automatisch McRoberts-Manöver und suprapubischen Druck
- Für den Zangeneinsatz geeignet
- Abklemmen und Durchtrennen der Nabelschnur möglich
- Intramuskuläre Injektionsstellen

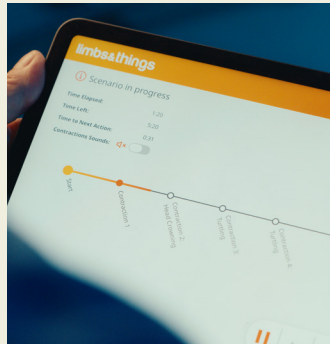

KONFIGURATIONEN

- Kindslage:
 - OA
 - OP
 - Beckenendlage
- Anzahl und Häufigkeit der Wehen wählbar
- Komplikationen:
 - Schulterdystokie
 - Assistierte vaginale Entbindung (Saugglocke, Zange und OdonAssist)
 - Postpartale Blutungen

POSTPARTALE BLUTUNGEN (PPH)

Verfügbar als unabhängiger Schulungsmodus.

SZENARIO

Simulation einer vollen PPH über eine integrierte, geschlossene Matte, die saubere Blutungssimulationen und einfaches Reinigen ermöglicht.

Konfigurationen:

- Dauer bis zum Einsetzen nach der Geburt
- Blutflussrate
 - Leicht – Mittelschwer – Schwer
- Interventionen, die die Blutung stoppen
 - Fundusmassage
 - Entfernung eines Plazentateils
 - Manueller Stopp

FUNDUSMASSAGE

Wird Druck aufgebracht, wechselt der Uterus zwischen dem schlaffen (atonischen) und kontrahierten Zustand. Ermöglicht, die Technik zu perfektionieren und ein Gefühl für jeden Zustand zu entwickeln.





BENUTZEROBERFLÄCHE

- Maya wird über eine einfache App gesteuert, die sich per Bluetooth mit dem Modell verbindet und auf jedem Tablet funktioniert.
- Entbindungsszenarien können in der App gespeichert und bei zukünftigen Schulungseinheiten schnell wieder abgerufen werden.
- In den erweiterten Einstellungen können Anwender die Präferenzen für die Position des Babys bei bestimmten Meilensteinen, etwa dem Sichtbarwerden des Scheitels, speichern.
- Verfügbar in 12 Sprachen.


MAYAS BABY

- Stellt ein reifes Kind in Gewicht und Größe nach
- Spinalflexion
- Korrekte, tastbare Orientierungspunkte (Schlüsselbeine, Schulterblatt, Nähte und Fontanellen)
- Voll bewegliche Arme und Beine

LIEFERUMFANG

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| • Maya | • 4 Teile für Präsentationen und Zervix | • Tragetasche mit Rollen |
| • Baby | • PPH-Uterus | • Akku* |
| • Abnehmbare Unterschenkel | • Clean Bleed-Matte und Reservoir | • Ladekabel |
| • Plazenta (mit zurückbleibendem Teil) | • Riemen zur Befestigung am Bett | *8 Stunden Akkulaufzeit |

Weitere Informationen
erhalten Sie auf
unserer Website

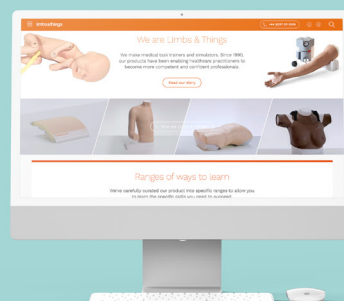

ANGEBOT
ANFORDERN



DEMO
ANFORDERN



KUNDENSUPPORT

DE V.1 August 2026

limbsandthings.com