



Maya

limbs&
things

Simulador del parto
y el alumbramiento

80500

80600

Alumbramiento totalmente
automatizado para enseñar
las tres fases del parto.



limbsandthings.com



Alumbramiento totalmente automatizado para enseñar las 3 fases del parto.

Formación totalmente automatizada en examen vaginal, distintas situaciones de parto y hemorragia postparto. Prepare el simulador en cuestión de minutos, seleccione los parámetros de formación y deje que Maya se encargue del resto.



Rápida configuración y uso para permitirle concentrarse en lo más importante



Formación repetible para proporcionar homogeneidad a cada estudiante



Períodos de enseñanza intensivos: concéntrese en la formación gracias a la simulación totalmente automatizada



Aprendizaje independiente: facilidad de uso para que los estudiantes puedan aprender a su ritmo



Apto para su uso con una paciente estandarizada para mayor realismo



Hemorragia postparto sin ensuciar



Ideal para reconocimiento y para el ECOE (examen clínico objetivo y estructurado)



No es necesaria ninguna suscripción



Maya tiene 3 modos

EXAMEN VAGINAL

Practique el reconocimiento de las distintas fases del parto con referencias anatómicas realistas, como las espinas ciáticas y la pared vaginal.



CONFIGURACIONES

- Cuatro presentaciones:
 - Flexión de la cabeza fetal
 - Deflexión de la cabeza fetal
 - Indiferente
 - De nalgas
- 4-10 cm de dilatación
- Posicionable en 360°



PARTO

- Cree situaciones de parto totalmente automatizadas según los requisitos de sus sesiones de formación.
- Presentación cefálica y de nalgas
- Registre las acciones del/la estudiante y reciba un informe con fecha y hora
- Los sensores detectan automáticamente el procedimiento de McRoberts y la intervención con presión suprapúbica
- Compatible con fórceps
- Pinzamiento y corte del cordón umbilical
- Sitio de inyección intramuscular

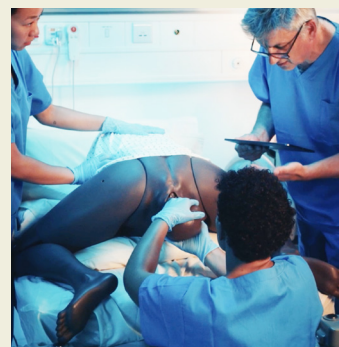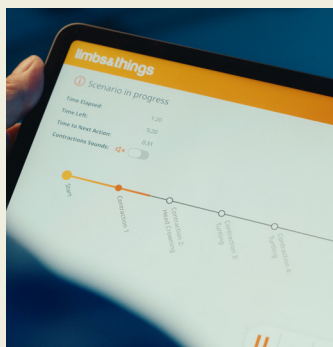

CONFIGURACIONES

- Presentación del feto:
 - OA (occipitoanterior)
 - OP (occipitoposterior)
 - De nalgas
- Seleccione el número y la frecuencia de las contracciones
- Complicaciones:
 - Distocia de hombros
 - Parto vaginal asistido (ventosa, fórceps y dispositivo Odon Assist)
 - Hemorragia postparto

HEMORRAGIA POSTPARTO (HPP)

Disponible como modo de formación independiente.

SITUACIÓN

Simule una HPP completa en la alfombrilla estanca integral para simular un sangrado sin ensuciar y de fácil limpieza.


Configuraciones:

- Tiempo de comienzo tras el parto
- Caudal sanguíneo
 - Medio - Moderado - Grave
- Intervención que detendrá la hemorragia
 - Masaje del fondo del útero
 - Extracción de un fragmento de la placenta
 - Parada manual

MASAJE DEL FONDO DEL ÚTERO

Al aplicar presión, el útero pasará de un estado blando (atónico) a contraído. Perfeccione la técnica y acostúmbrase a detectar cada estado por el tacto.



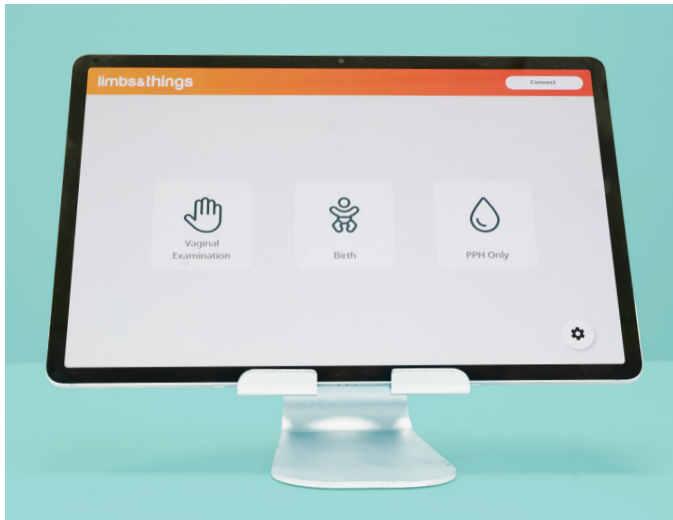

INTERFAZ DE USUARIO

- Maya se controla mediante una sencilla app que se conecta al simulador mediante Bluetooth y está disponible para cualquier tableta.
- Guarde las situaciones de parto en la app para preparar rápidamente sesiones posteriores homogéneas.
- La configuración avanzada permite ajustar la posición del feto deseada en ciertas fases del parto, como la coronación.
- Disponible en 12 idiomas distintos.

EL BEBÉ DE MAYA

- Refleja el peso y tamaño de un neonato a término
- Flexión de la columna
- Referencias anatómicas correctas palpables (clavículas, omóplatos, líneas de sutura, fontanelas)
- Brazos y piernas totalmente articulados

QUÉ INCLUYE EL KIT


- Maya
- Bebé
- Piernas inferiores desmontables
- Placenta (con fragmento retenido)

- 4 partes presentadas y cuello uterino
- Útero con HPP
- Alfombrilla Clean Bleed y depósito
- Correa para camilla

- Maletín con ruedas
- Batería*
- Cable de carga

*Duración de la batería: 8 horas

Encontrará más
información en
nuestro sitio web

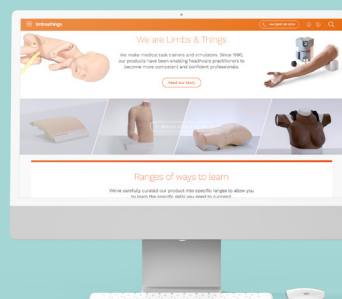

ESCANÉAME



SOLICITAR
PRESUPUESTO



SOLICITAR
DEMOSTRACIÓN



ATENCIÓN
AL CLIENTE

SP V.1 August 2026

limbsandthings.com