



GAMME DE BRAS DE PONCTION VEINEUSE

La gamme de bras de ponction veineuse constitue la plate-forme de simulation idéale pour mettre en pratique les compétences liées à la ponction veineuse et à la canulation IV.

Convient aux formations de premier et de troisième cycle.

70304	70305	BASIC
70302	70303	STANDARD
70300	70301	AVANCÉ

NOUVEAU



BREVET EN ATTENTE
NR: GB 20167007.8

L'enseignement n'a jamais été aussi proche de la réalité

limbsandthings.com




Le mécanisme de verrouillage de la peau (en instance de brevet) permet de garantir que la peau est facile à enfiler, tout en conservant la sensation haptique réaliste des veines basiliques, céphaliques et métacarpiennes dorsales sous-jacentes et entièrement palpables.

BRAS DE PONCTION VEINEUSE DE BASE

70304

70305

Conçu avec un réseau veineux de base, ce modèle ne contient que des veines basiliques et céphaliques.

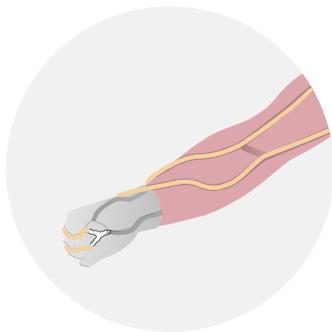


BRAS DE PONCTION VEINEUSE STANDARD

70302

70303

Pour une simulation efficace, le système veineux modulaire contient la veine de fosse antécubitale et l'anatomie de la veine métacarpienne.

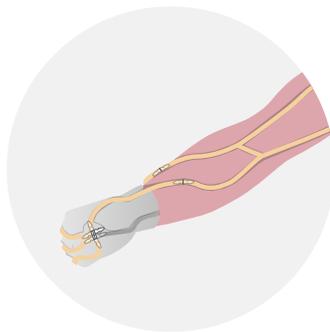


BRAS DE PONCTION VEINEUSE AVANCÉ

70300


70301

Le bras de ponction veineuse avancée présente l'anatomie de la de fosse antécubitale et de la veine métacarpienne qui est reliée à un système de fluide sous pression pour une circulation sanguine réaliste.

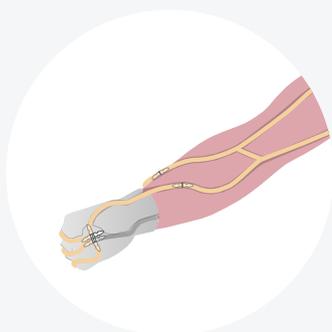

COMPÉTENCES

- Ponction veineuse
- Cannulation IV
- Infusion IV
- Pratique de technique aseptique

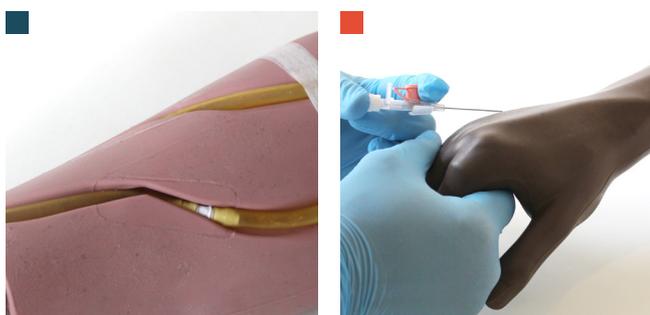

- Inspection visuelle et palpation
- Le système de préhension permet de localiser les veines de façon réaliste
- Possibilité de positionner la main pour une insertion de canule réaliste

QUALITÉS

RÉALISME

- Retour de sang réaliste
- Une apparence et une sensation plus réalistes du bras
- Le système de préhension permet de localiser les veines de façon réaliste

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- L'haptique réaliste et palpable des veines favorise un usage clinique précis
- Le système de verrouillage de la peau facile à installer (brevet en instance) améliore le réalisme anatomique
- La nouvelle fonction de préhension des veines facilite la bonne localisation des veines, la répétition de la simulation et le processus de remise en place de la peau
- Permet l'application d'une pression numérique pour contenir le flux sanguin
- Le tube de perfusion permet d'administrer des liquides par voie intraveineuse
- Peut être utilisé en conjonction avec un patient simulé

POLYVALENCE

- Compatible avec les systèmes de prélèvement sanguin sous vide, les aiguilles et les seringues ainsi que les canules IV
- Une peau durable
- Les tubulures plus longues permettent de simuler un patient dans une salle de classe
- Les veines peuvent supporter jusqu'à 500 piqûres avec une aiguille de 21g
- Le bras peut être amélioré par l'achat de veines modulaires et de la pompe sous pression avancée

SÉCURITÉ

- Les veines de base, standard et avancées contiennent du latex
- La veine de base est disponible sans latex, mais sa durabilité est réduite

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Facilité de nettoyage, d'entretien et de maintenance

COMPARAISON DES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

	70304	70302	70300
	70305	70303	70301
• Mécanisme breveté de verrouillage de la peau	✓	✓	✓
• Système de préhension des veines pour une mise en place facile	✓	✓	✓
• Des veines modulaires pour une formation rentable	×	✓	✓
• Des veines palpables réalistes	✓	✓	✓
• Retour de sang réaliste	✓	✓	✓
• Des tubes rallongés pour la simulation hybride	✓	✓	✓
• Un système à gravité	✓	✓	×
• Un système de fluide sous pression	×	×	✓

CE QUI EST INCLUS

	70304	70302	70300
	70305	70303	70301
Bras de ponction veineuse	✓	✓	✓
Peau de bras de ponction veineuse	✓	✓	✓
Veine de base du bras de ponction veineuse	✓	×	×
Module de veine de fosse antécubitale	×	✓	✓
Module de veine métacarpienne	×	✓	✓
Système d'apport en sang par gravité	✓	✓	×
Apport pour ponction veineuse	×	×	✓
Sang veineux concentré - Pack de démarrage	✓	✓	✓
Appui-bras pour ponction veineuse	✓	✓	✓
Bouteille de recharge	×	×	✓
Tube de perfusion du bras de ponction veineuse	✓	✓	✓
Sachet de lubrifiant (x3)	✓	✓	✓



RÉFÉRENCES DU CURRICULUM

PREMIER CYCLE

Outcomes for graduates (Tomorrow's Doctors), 2016, Appendix 1, Practical procedures for Graduates, p.12-14

1E ET 2E ANNÉES DE CYCLE PRÉPARATOIRE

UK Foundation Programme Curriculum, mis à jour en 2014, p.50

FORMATION MÉDICALE DE BASE

Specialty Training Curriculum For Core Medical Training, 2013, p.165

STAGIAIRES EN MÉDECINE D'URGENCE

The Royal College of Emergency Medicine Curriculum and Assessment Systems For Training in Emergency Medicine, 2015 (Révisé en 2016)

AUXILIAIRE MÉDICAL(E)

NHS National Practitioner Program: Matrix Specification for the Physician Associate, 2016), p.127

INFIRMIER(ÈRE)S DIPLOMÉ(E)S

NMC Future Nurse: Standards of proficiency for registered nurses, 2018, p.32

ASSISTANTS DE SANTÉ

The Cavendish Review - An Independent Review into Healthcare Assistants and Support Workers in the NHS and social care settings, 2013, p.18

PHLÉBOLOGUES

UCL Medical School, Clinical Skills, Accessible à l'adresse www.ucl.ac.uk/medicalschooll/cpsc/phlebotomy

FR 2021



DEMANDER
UN DEVIS



DEMANDER
UNE DÉMONSTRATION



ASSISTANCE
À LA CLIENTÈLE

limbsandthings.com