



## SIMULADOR DE INYECCIÓN EN MANO Y MUÑECA

Apto para cualquier nivel de formación, el simulador de inyección en mano y muñeca permite que estudiantes y personal médico practiquen y enseñen a inyectar en cinco ubicaciones distintas. El modelo también muestra si la inyección se realiza de manera incorrecta, y garantiza que los estudiantes aprendan a evitar el nervio mediano.

El simulador viene acompañado con una tableta Android, que incluye nuestra recién lanzada aplicación. Dicha app, unida a la innovadora tecnología sensorial utilizada, brinda a los estudiantes una respuesta inalámbrica en tiempo real durante la práctica.

70230 CON TABLETA

70232 SIN TABLETA

NUEVO



*El aprendizaje más realista posible*  
limbsandthings.com

# ANATOMÍA

## PUNTOS DE INYECCIÓN

- Túnel carpiano
- Vaina de De Quervain
- Dedo en gatillo
- Primera articulación carpometacarpiana
- Articulación radiocubital distal
- Nódulo de dedo en gatillo
- Nervio mediano

## ESTRUCTURAS ÓSEAS

- Estiloides radial
- Estiloides cubital
- Trapecio y escafoides
- Espacio de la primera articulación carpometacarpiana
- Espacio de la articulación radiocubital distal
- Tubérculo de Lister

## ANATOMÍA INTERNA

- Palmar largo
- Flexor radial del carpo
- Extensor común de los dedos
- Extensor propio del meñique
- Abductor largo del pulgar
- Extensor corto del pulgar
- Extensor largo del pulgar

NÓDULO DE DEDO EN GATILLO

TENDÓN DEL PALMAR LARGO

TENDÓN DEL FLEXOR RADIAL DEL CARPO



METACARPIANO 1 (BASE)

TENDONES DE LA TABAQUERA ANATÓMICA

ESTILOIDES RADIAL

ESTILOIDES CUBITAL

TUBÉRCULO DE LISTER

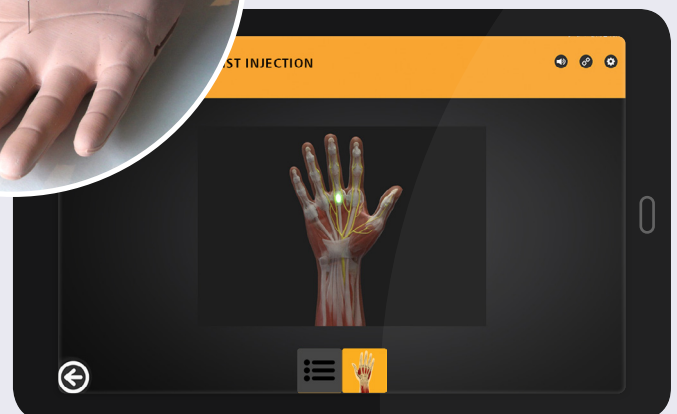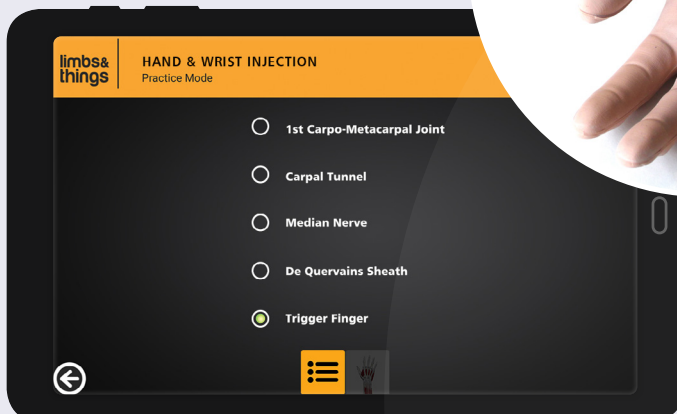



## CARACTERÍSTICAS

### REALISMO

- Modelo con anatomía interactiva
- Anatómicamente correcto
- Incluye esenciales estructuras óseas y de ligamentos

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Facilita la inyección en 5 puntos clave
- La presencia del nervio mediano permite notificar una inyección mal realizada
- La nueva app proporciona respuesta interactiva en tiempo real
- Cada punto puede ser inyectado más de 200 veces
- La piel puede quitarse y cambiarse fácilmente

### VERSATILIDAD

- Ligero y fácil de transportar
- App configurable en español, inglés británico, inglés americano, francés, alemán y mandarín

### SAFETY

- No inyectar fluido en ninguno de los puntos clave para no dañar los componentes electrónicos alojados
- No contiene látex

## HABILIDADES

- El modelo permite inyectar en:
  - Túnel carpiano
  - Vaina de De Quervain
  - Dedo en gatillo
  - Primera articulación carpometacarpiana
  - Articulación radiocubital distal
- Posicionamiento y gestión del paciente
- Identificación de los puntos de referencia anatómicos

## QUÉ INCLUYE EL KIT

Modelo de mano y muñeca

Piel de mano y muñeca (x2)


Tableta Android

Juego de punción: 3 agujas verdes, 1 jeringa

Contenedor de agujas

Pilas AA (x2)

PARTE DE LA  
GAMA DE  
PRODUCTOS  
PARA  
INYECCIONES  
ARTICULARES

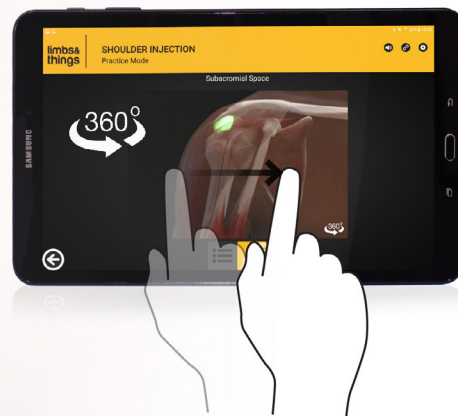

ES 2021



SOLICITAR  
PRESUPUESTO



SOLICITAR  
DEMOSTRACIÓN



ATENCIÓN  
AL CLIENTE

[limbsandthings.com](http://limbsandthings.com)